

*imperial*Top4

un'isola di Salute




imperial-life®
dal 1990

complimenti

Con l'acquisto di questa poltrona massaggiante avete dimostrato la vostra consapevolezza per la salute.

Per poter sfruttare i vantaggi della vostra poltrona massaggiante, vi preghiamo di leggere le istruzioni di sicurezza.

Vi auguriamo buon relax con la vostra nuova **ImperialTop4**.

ISTRUZIONI *per un corretto e benefico utilizzo della poltrona ImperialTop4*

Consigliamo l'utilizzo della **Poltrona** per sessioni di massaggio della durata massima di 20 minuti al giorno.

Dopo 20 minuti di utilizzo la poltrona termina automaticamente il ciclo di massaggio programmato.



Istruzioni di sicurezza

Consultate un medico prima di utilizzare la poltrona se:

- Siete portatori di pacemaker
- in caso di gravidanza
- in presenza di un tumore maligno

Salvo diversa indicazione del Vostro medico, Vi consigliamo di limitare l'utilizzo di talune tipologie di massaggio (che Vi verranno da noi prescritte), se:

- soffrite di osteoporosi grave
- se avete disturbi di percezione
- se siete sotto terapia medica
- se siete portatori di handicap fisico

ATTENZIONE! Non toccate con le dita le testine massaggianti. Pericolo di infortunio!

Per motivi di sicurezza è severamente vietato aprire autonomamente la poltrona.

Non lasciate che i bambini usino da soli la poltrona, onde evitare scosse elettriche o lesioni.

Evitare che la poltrona si bagni o che sia esposta a temperature eccessivamente alte.

Non usate spine, cavi e prese difettose. Se la spina o il cavo è danneggiato, farlo sostituire dal costruttore, dal centro assistenza o da personale qualificato.

Trattare con cura le parti meccaniche ed elettriche della poltrona. Non appoggiare oggetti pesanti sulla poltrona.

Dopo l'utilizzo o dopo un periodo di inutilizzo prolungato verificare che la spina di alimentazione sia scollegata dalla presa onde evitare il rischio di scossa elettrica, cortocircuito o incendio.

In caso di disfunzione della poltrona, staccare immediatamente la corrente elettrica.

Non toccare la spina con le mani bagnate.

Avvisi medici

Il tempo di massaggio non dovrebbe superare i 20 minuti raccomandati onde evitare una stimolazione eccessiva dei muscoli e dei nervi.

Se il vostro medico/ortopedico non vi ha esplicitamente vietato il massaggio alla schiena, potete godere tranquillamente del massaggio sulla poltrona massaggiante.

L'intensità del massaggio aumenta se la poltrona viene portata in posizione reclinata. Si raccomanda di farsi massaggiare all'inizio in posizione seduta.

Il massaggio non deve essere mai fastidioso.

I massaggi eccessivi possono essere nocivi.

Le donne incinte, le persone malate e i bambini non dovrebbero utilizzare la poltrona. In caso di lesioni alla spina dorsale o dopo interventi chirurgici, il massaggio può essere pericoloso. Se avete dei dubbi chiedete al Vs. medico.

Istruzioni per la cura

Avete acquistato un prodotto di alta qualità che richiede una cura appropriata. Non lasciate la poltrona esposta alla luce diretta del sole o in ambienti umidi.

Trattare la poltrona massaggiante regolarmente con prodotti per la cura raccomandati. In questo modo durerà per lungo tempo.



Garanzia

Il rivenditore concede un periodo di garanzia prevista per legge. La garanzia decorre dalla data di acquisto. La data di acquisto deve essere comprovata da un idoneo documento d'acquisto.

Il rivenditore ripara o sostituisce gratuitamente i prodotti difettosi. Sono esclusi dalla garanzia le parti soggette ad usura come per esempio i rivestimenti in stoffa.

Il prodotto interessato dovrà essere spedito al rivenditore, insieme alla ricevuta di acquisto, entro il periodo di validità della garanzia. Il diritto alla garanzia si estingue se il danno è causato dall'esecuzione di riparazioni o interventi da persone non autorizzate.

La garanzia concessa dal rivenditore si limita alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. Nell'ambito della garanzia, il costruttore o il rivenditore non si assume ulteriori responsabilità e non risponde dei danni causati dalla non osservanza delle istruzioni d'uso e/o dall'uso inappropriato del prodotto.

Se durante il controllo del prodotto da parte del rivenditore viene accertato che la richiesta di garanzia riguarda un danno che non è coperto da garanzia o che il periodo di garanzia è scaduto, i costi per il controllo e la riparazione sono a carico del cliente.

Messa in servizio

Prima della messa in servizio verificare che la tensione della rete corrisponda alla tensione indicata sulla spina. Se non è già stato fatto, collegare il cavo della rete alla parte posteriore della poltrona massaggiante e inserire la spina nella presa.

caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 114x85x75,5 cm. reclinata: 130 cm.

Angolo d'inclinazione fino a: 175°, Peso: 59 Kg.

Dimensioni del poggiambracci: 53 x 39 x 35,5 cm., Peso: 12 Kg.

Tensione: AC ~ 220 – 240 V 50 Hz, 120 Watt

Durata automatica: 20 minuti

Durata manuale: 30 minuti

Certificati:



descrizione e funzionamento

Con il telecomando regolate l'allungamento, l'impastamento e il picchietto dalla spalla all'anca. Avete a disposizione tre programmi che massaggiano la parte superiore e inferiore della schiena oppure la schiena intera. Inoltre comanda anche un'altra funzione di massaggio, che segue il ritmo della musica.

In base alle vostre esigenze, potete anche scegliere singolarmente il tipo di massaggio, con diversi livelli d'intensità oppure potete scegliere una determinata parte che volete massaggiare.

Per i glutei si hanno inoltre due livelli di vibrazione.



Musica sincronizzata




1 = *musica sincronizzata*

2 = box lettore musica ed alloggiamento

3 = input per lettore musica

Per usare la funzione *musica sincronizzata*, vi serve per esempio un lettore MP3. Con il cavo in dotazione potete collegare il lettore MP3 o qualsiasi altra fonte di musica all'input (vedi punto 3).

Come prossimo passo dovete attivare il tasto *musica* (vedi punto 1). Accendere ora il vostro lettore MP3. Potete ascoltare la musica attraverso i box incorporati o attraverso le cuffie.

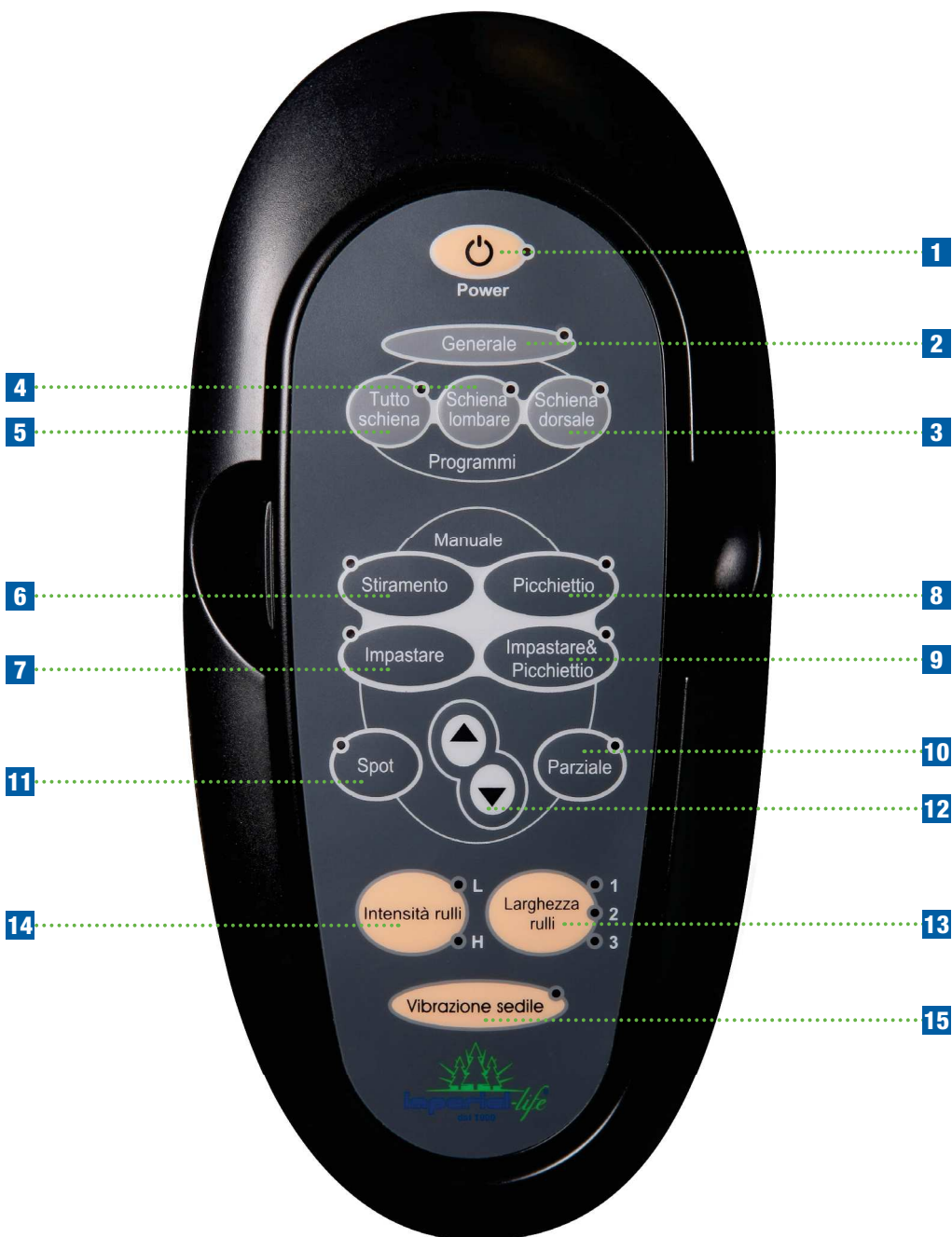

telecomando POLTRONA

1 Accensione e spegnimento

2 Generale

Adatta il massaggio al ritmo della musica che viene trasmessa dal lettore musicale (MP3 o cellulare) inserito nell'apposito input d'ingresso audio (bracciolo destro).

3 Schiena dorsale

Indicato per massaggiare la **zona dorsale alta** ed il **collo**. Adatto per **dolori cervicali**.

4 Schiena lombare

Indicato per prevenire dolori nella **zona lombare**. Adatto per chi ha una **vita sedentaria** o svolge attività logoranti per la **parte bassa della schiena**.

5 Tutto schiena (mix di tecniche massaggianti)

Indicato come **preparatorio** e di **riscaldamento** per **tutti i muscoli della schiena**.

6 Stiramento

Indicato per tutte le **compressioni intervertebrali** (alcuni esempi: **discopatie**, **ernie vertebrali**, **schiacciamenti vertebrali**, **scoliosi**, **lombosciatalgia**). Funzioni supplementari: **parziale** (10) e **larghezza rulli** (13).

7 Impastare

Adatto per **stimolare e riattivare la circolazione sanguigna**. Indicato per **problemi di pressione** ed in tutti i casi di **cattiva circolazione sanguigna**. Funzioni supplementari: **parziale** (10), **spot** (11), **intensità rulli** (14).

8 Picchiettio

Massaggio **rilassante** della **muscolatura paravertebrale**. Indicato per combattere lo **stress**, **tensioni**, **insonnia**. Funzioni supplementari: **parziale** (10), **spot** (11), **larghezza rulli** (13) e **intensità rulli** (14).

9 Impastare e picchiettio

Massaggio **decontratturante** e **stimolante**. Indicato per **sportivi** o per **attività muscolari intense**. Funzioni supplementari: **parziale** (10), **spot** (11) e **intensità rulli** (14).

10 Parziale

Attivando questo tasto i rulli massaggiano nella zona parziale della schiena scelta.

11 Spot (bloccaggio)

Attivando questo tasto i rulli si fermano massaggiando solamente nel punto scelto.

12 Rulli su / giù

Con il tasto **Spot (bloccaggio)** attivato, questi tasti permettono di far salire o scendere i rulli massaggianti.

13 Larghezza rulli

Regola la distanza tra rulli e colonna vertebrale, regolabile in tre posizioni.

14 Intensità rulli

Regola il vigore del massaggio più leggero (L) o più forte (H).

15 Vibrazione sedile

Riattiva la circolazione e stimola il tono muscolare. Indicato per combattere **cellulite**, **artrosi** ed **osteoporosi**. Premendo una volta viene attivata la vibrazione continua; premendo la seconda volta si attiva la vibrazione intermittente; premendo una terza volta la vibrazione si spegne.

Funzione

ImperialTop4 dispone di due altoparlanti sulla parte superiore dello schienale, che permettono un surround-sound. Collegate semplicemente il vostro lettore MP3 alla poltrona e godetevi la musica. Gli impulsi di massaggio possono essere adattati al ritmo della musica grazie al tasto musica sincronizzata.

ImperialTop4 vi vizia con 3 programmi intelligenti di massaggio. In più, le singole funzioni di massaggio come allungamento, picchietto e impastamento possono inoltre massaggiare ognuna per conto suo e in punti precisi. Il poggia gambe completa il massaggio nella zona dei polpacci e delle piante dei piedi attraverso compressione. In questo modo si ottiene un rilassamento completo.



Corrisponde alla direttiva europea 89/336/EEC, 93/68/EEC.

Copyright Le immagini e i testi sono protetti da copyright di Imperial s.r.l. e non devono essere utilizzati senza l'espressa conferma. **Tutti i diritti riservati.**



Via Ciucani, n° 5 - 20876 ORNAGO (MB)
Tel. 0461 662002 - Fax 0461 662515
info@imperial-life.com - www.imperial-life.com